

NARKOSETIEFE SICHER. BESTIMMT. DOSIERT.

VERLAUFSKONTROLLE

Narkosetiefe
Blutdruckverlauf (optional)

NARKOSETIEFE-INDEX

NARCOguide®-Index (DoA)
zwischen 0 und 100
Automatische Erkennung von
Burst Suppression (BSR)




ROHDATEN

EEG
EKG

HÄMODYNAMIK

Blutsauerstoffsättigung (SpO₂)
Herzfrequenz (BPM)
Blutdruck (mmHg)

UMFANGREICHE ANÄSTHESIEÜBERWACHUNG
Für Patienten unter Vollnarkose

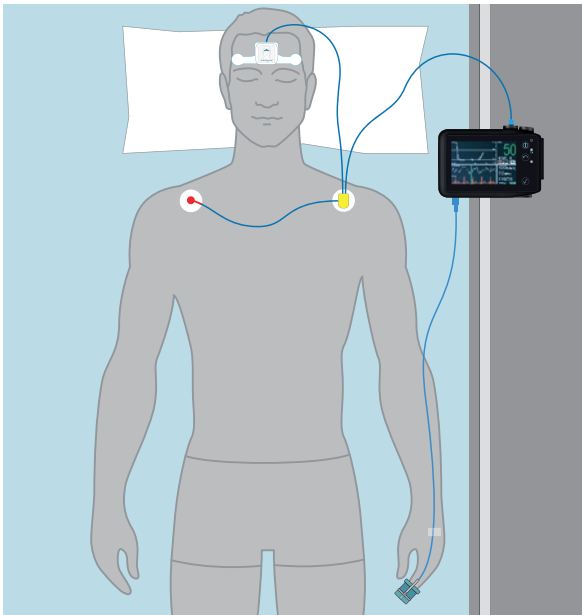

NARKOSETIEFE & HÄMODYNAMIK: NICHT-INVASIV UND INNOVATIV

Kontinuierlicher Blutdruck

- ◆ Blutdruckmessung via Puls-Transit-Zeit* (PTT): kontinuierlich, nicht-invasiv, beat-to-beat
- ◆ Nur EKG und SpO₂-Sensoren notwendig

Umfangreiche Anästhesieüberwachung

- ◆ EEG-basierte Narkosetiefebestimmung
- ◆ Nicht-invasive Blutdruckmessung (NIBP)
- ◆ EKG
- ◆ Herzrate
- ◆ SpO₂
- ◆ Ergänzend zum Basismonitoring



EEG-Adapter und
Stirnelektrode

Technische Details:

- ◆ Stand-Alone-Gerät: plug & play
- ◆ Automatische Impedanzkontrolle: 3 x pro Minute
- ◆ 3-Kanal-Stirnelektrode: Einwegprodukt, Latexfrei
- ◆ Kleines & kompaktes Design: 74 mm x 110 mm x 22 mm, 190 g
- ◆ Display: HD-Touchscreen
- ◆ Akkulaufzeit: 8 Std. Betriebsdauer via Li-Ionen Batterie
- ◆ PC-Software für Datentransfer, Archivierung, PDF-Report, kostenfreie Software Updates

Erhältlich in 2 Versionen:

- ◆ Basisversion mit Narkosetiefemessung
- ◆ Kardiooption mit Narkosetiefemessung & kontinuierlicher Blutdruckmessung



* Patentierten Algorithmus. Patentnummer: DE 102005014048.3-35, EP 20060001181.4-1526, US 11/364174 US 2006/0217616 A1, 7374542.